

Mandibolari				P/N		
EXP mm RC LW .022"	T°	Α°	Hk	Destri	Sinistri	
L1-2	-6	0	-	24-4610-0100	24-4610-0100	
LL3	0	3	D	24-443D-0100	24-433D-0100	
LL4	-12	2	-	24-4440-0100	24-4340-0100	
LL4	-12	2	D	24-444D-0100	24-434D-0100	
LL5	-17	2	-	24-4450-0100	24-4350-0100	
LL5	-17	2	D	24-445D-0100	24-435D-0100	




Descrizione	P/N
BioActive RC Forma D 013 LIGHT	74-D100-0013
BioActive RC Forma D 014 LIGHT	74-D100-0014
BioActive RC Forma D 016 LIGHT	74-D100-0016
BioActive RC Forma D 14X25 LIGHT	74-D100-1425
BioActive RC Forma D 16X16 LIGHT	74-D100-1616
BioActive RC Forma D 16X22 LIGHT	74-D100-1622
BioActive RC Forma D 17X25 LIGHT	74-D100-1725
BioActive RC Forma D 18X18 LIGHT	74-D100-1818
BioActive RC Forma D 18X25 LIGHT	74-D100-1825
BioActive RC Forma D 19X25 LIGHT	74-D100-1925
BioActive RC Forma D 20X20 LIGHT	74-D100-2020







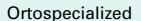



Quando il Metallo incontra l'Estetica Quando il Metallo incontra l'Estetica

Prescrizione Low Friction



Bassa frizione

Abbiamo sviluppato il Bracket passivo con la minor frizione possibile in tutte le fasi del trattamento

Forze leggere

La bassa frizione consente l'uso degli archi che sviluppano forze più leggere con lo stesso risultato.

BioActive Light

Forze progressive e memoria di forma disponibili da .013 "a .020" x .020 ".

Bracket attivo







Il rodio ha la caratteristica unica di limitare il riflesso. La sua finitura argento opaco fornisce un migliore aspetto estetico.





EXPERIENCE ™ mini metallo rodio passivo


I Brackets in metallo rodio passivo EXPERIENCE ™ a basso profilo sono prodotti con alti standard qualitativi, gli stessi standard forniti su tutti i prodotti della TOMY International Inc. Lo slot del Bracket è fresato per una maggiore precisione, il torque è nella base, la clip è passiva, mentre il suo basso profilo ne migliora il confort del paziente. Le basi micro-incise aumentano l'adesione del composito riducendo al minimo i distacchi.

Per un Trattamento Completo Per un Trattamento Completo

Archi

La nostra linea di archi trattati con rodio assicurano un effetto estetico completo, grazie ad una ampia gamma di sezioni si riesce a coprire tutte le fasi di trattamento, per soddisfare al massimo le esigenze del medico e, per offrire al paziente un trattamento globale senza compromessi biomeccanici. Archi tondi INITIALLOY ™ Rhodium com memoria di forma con forze leggere o medie. Archi quadrati e rettangolari BIO-ACTIVE ™ Light con forze progressive leggere. Archi quadrati e rettangolari BIO-ACTIVE ™ con forze progressive. Archi Stainless Steel sia tondi che quadrati e rettangolari.



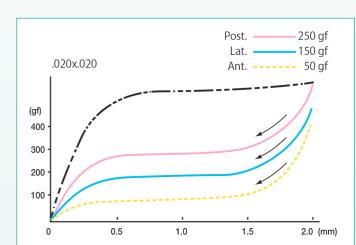







BIO-ACTIVE ™ Ligth è un arco di memoria di forma che esercita una forza progressiva dalla linea mediana ai settori posteriori. Le forze partano da 50 gr nel settore anteriore per poi arrivare in maniera progressiva a 250gr a livello dei molari.

Sébastien L. * 13/10/2016







Sébastien L. * 21/12/2016







^{*} Foto per gentile concessione del Dr. Stefano Troiani (DDS, MSc), Segan (Germania), arco BIO-ACTIVE ™ Light .020 "x .020".